


Набор полосок для иммунохроматографического
одновременного выявления десяти наркотических соединений и
их метаболитов в моче человека (ИХА-10-Мульти-ФАКТОР)

ФСР 2012/13745

набор, анализируемый материал моча, выявление
амфетамин / барбитураты / бензодиазепин / кокаин /
марихуана / МДМА / метадон / метамфетамин /
морфин / ТАД, время анализа 5 мин, планшет
индикаторный

ФАКТОР-МЕД ООО, Россия

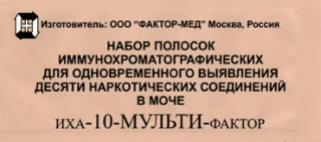

Характеристики

Тип	набор
Анализируемый материал	моча
Выявление	амфетамин / барбитураты / бензодиазепин / кокаин / марихуана / МДМА / метадон / метамфетамин / морфин / ТАД
Минимально определяемая концентрация	амфетамин - 1000 нг/мл барбитураты - 300 нг/мл бензодиазепин - 300 нг/мл кокаин - 300 нг/мл марихуана - 50 нг/мл МДМА- 500 нг/мл метадон - 300 нг/мл метамфетамин - 500 нг/мл морфин - 300 нг/мл ТАД -1000 нг/мл
Время анализа	5 мин
Состав теста	планшет индикаторный

Дополнительные характеристики

Набор ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР предназначен для in vitro (вне организма) одноэтапного быстрого
качественного одновременного выявления морфина, марихуаны, кокаина, амфетамина, метамфетамина,
метадона, барбитуратов, бензодиазеина, МДМА (Экстази) и ТАД (трициклических антидепрессантов) в моче
человека методом иммунохроматографического анализа. Анализируемые образцы мочи и используемые
Наборы ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР перед проведением анализа должны быть доведены до комнатной
температуры (+18-25° С) в течение времени не менее 10 мин. В чистую сухую емкость внести анализируемый
образец мочи человека (15-20 мл). Вскрыть упаковку планшета, разрывая ее вдоль прорези, извлечь планшет и
погрузить его строго вертикально концом со стрелками в мочу до уровня ограничительной линии на 20-30 сек.
Извлечь планшет из мочи, положить его на горизонтальную ровную чистую сухую поверхность и через 5 мин
визуально оценить результат реакции.