

Пластырь Мепиформ для лечения рубцов

ФСЗ 2012/11683

пластырь, для лечения рубцов, нестерильный, основа
силикон, 5×7.5 см / 10×18 см / 4×30 см

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	для лечения рубцов
Вид	нестерильный
Основа	силикон
Размер	5×7.5 см / 10×18 см / 4×30 см


Описание

Силиконовый пластырь Мепиформ (Mepiform) – самоприлипающая повязка с мягким силиконом для лечения рубцов. Работает на свежих и старых гипертрофических и келлоидных рубцах.
Держится на коже не за счет приклеивания (как в обычных пластырях), а за счет присасывающего эффекта силикона. Именно поэтому один и тот же пластырь **можно многократно снимать и наносить** снова без потери его адгезивных свойств.

Пластырь Мепиформ **не является лекарственным средством**, поэтому его **можно применять**, как **детям**, так и **при беременности**. В состав Мепиформа входит чистый силикон, без добавления лекарственных веществ.

Срок ношения: от 5-ти до 14-ти дней (первое время 3-5 дней).
Рассасывание рубцов: от 3-х месяцев до 1 года.
Мепиформ необходимо носить постоянно. Можно снимать, если необходимо обработать рубец, а затем накладывать повторно.
Для максимального эффекта применение Мepiform следует начинать сразу после образования рубца.

Размеры: 5×7.5 см / 10×18 см / 4×30 см.

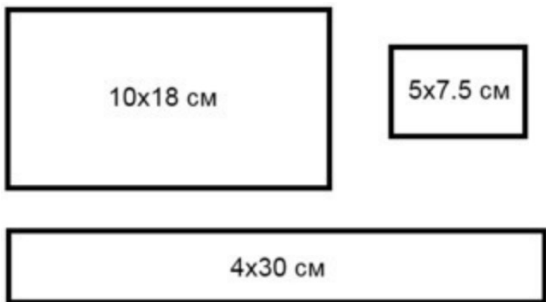

Свойства:

- телесного цвета;
- не требует дополнительной фиксации;
- с фильтром УФ-лучей (кожа под пластырем будет загорать, так же, как и без него, не образуя белесого пятна);
- большой пластырь можно разрезать обычными ножницами;
- водонепроницаемый (тем не менее, пластырь необходимо снимать перед душем, ванной или купанием);
- дышащий.

ВАЖНО! Необходимо, чтобы пластырь выступал на 1.5-2 см на здоровую кожу вокруг рубца.

В упаковке: 5 шт.