

Пробирка вакуумная Vacutest Kima с активатором свертывания

РЗН 2013/620

активатор свертывания, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0
мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм,
цветовой код красный, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima с активатором свертывания предназначены для исследования сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии.

Размеры:


- 13×75 мм - объем крови 2 / 3 / 4 мл;
- 13×100 мм - объем крови 6 мл;
- 16×100 мм - объем крови 9 мл.

Характеристики:

- Перемешивание пробы: сразу после взятия крови аккуратно переверните (но не встряхивайте) пробирку 6-8 раз.
- Центрифугирование: не ранее 30 минут и не позднее 2 часов после взятия крови.
- Параметры центрифугирования: 1300 g, 10 минут, при температуре 20-25 °C.
- Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Vacutest IN (утолщенные стенки)

С целью повышения качества результатов исследований свертывающей системы Vacutest KIMA выпускает пробирки с утолщенными стенками (особая технология Vacutest IN). Пробирки Vacutest IN обеспечивают более высокий уровень наполнения крови в пробирке по сравнению со стандартными пробирками аналогичного объема, что дополнительно предотвращает возможную активацию тромбоцитов.

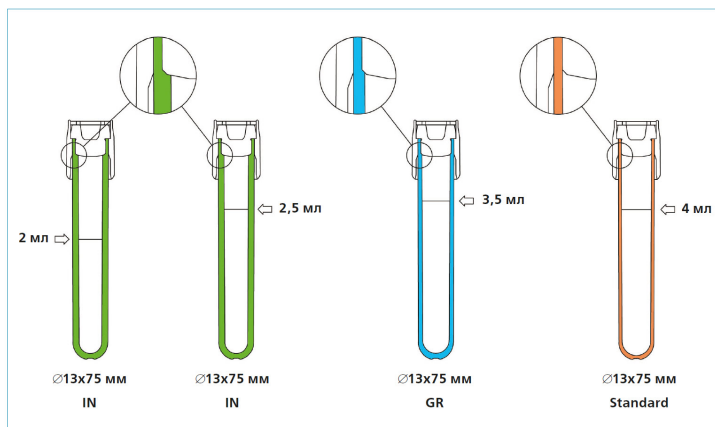

Крышка

Крышка пробирки состоит из прокалываемой пробки из бутилкаучука и внешнего пластикового колпачка. Пробка имеет углубление в месте прокола, чтобы защитить оператора от возможного контакта с кровью. Внешний колпачок выполнен из полиэтилена и служит для защиты от аэрозольного эффекта и брызг, предотвращает контакт оператора с резиновой пробкой и позволяет легко повторно надевать крышку. Особая форма внешнего колпачка позволяет использовать один и тот же держатель для пробирок с крышками диаметром 13 мм и 16 мм.

Заполнение пробирок

Дозированный вакуум обеспечивает заполнение пробирки кровью строго определенного объема. Для дополнительного контроля объема крови каждая пробирка имеет отметку уровня заполнения на этикетке. Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI допускается погрешность наполнения +/- 10% относительно отметки уровня наполнения на этикетке.



Хранение пробы:

- температура до 24 °C - не более 8 часов;
- температура 2-4 °C - от 8 до 48 часов;
- температура -20°C - более 48 часов.

Срок годности: 18 месяцев.