

Пробирка вакуумная Vacutest Kima с КЗ ЭДТА

РЗН 2013/620

КЗ ЭДТА, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код фиолетовый, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima с КЗ ЭДТА предназначены для исследования цельной крови в гематологии и иммунологии.

Наполнитель: КЗ ЭДТА.

Размеры:


- 13×75 мм - объем 1 / 2 / 3 / 4 мл;
- 13×100 мм - объем 6 мл;
- 16×100 мм - объем 9 мл.

Характеристики:

- Перемешивание пробы: сразу после взятия крови аккуратно переверните (но не встряхивайте) пробирку 6-8 раз.
- Центрифугирование: не проводится.
- Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Vacutest IN (утолщенные стенки)

С целью повышения качества результатов исследований свертывающей системы Vacutest KIMA выпускает пробирки с утолщенными стенками (особая технология Vacutest IN). Пробирки Vacutest IN обеспечивают более высокий уровень наполнения крови в пробирке по сравнению со стандартными пробирками аналогичного объема, что дополнительно предотвращает возможную активацию тромбоцитов.

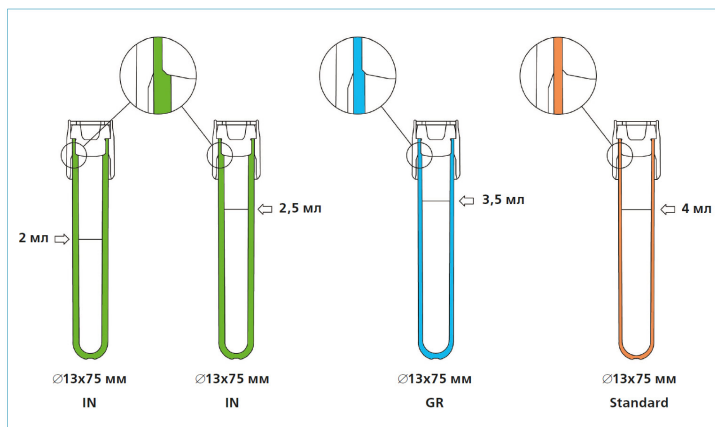

Крышка

Крышка пробирки состоит из прокалываемой пробки из бутилкаучука и внешнего пластикового колпачка. Пробка имеет углубление в месте прокола, чтобы защитить оператора от возможного контакта с кровью. Внешний колпачок выполнен из полиэтилена и служит для защиты от аэрозольного эффекта и брызг, предотвращает контакт оператора с резиновой пробкой и позволяет легко повторно надевать крышку. Особая форма внешнего колпачка позволяет использовать один и тот же держатель для пробирок с крышками диаметром 13 мм и 16 мм.

Заполнение пробирок

Дозированный вакуум обеспечивает заполнение пробирки кровью строго определенного объема. Для дополнительного контроля объема крови каждая пробирка имеет отметку уровня заполнения на этикетке. Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI допускается погрешность наполнения +/- 10% относительно отметки уровня наполнения на этикетке.



Хранение пробы:

- температура до 24 °C - 6 часов;
- температура 2-4 °C - не более 48 часов.

Срок годности: 18 месяцев.