

Пробирка вакуумная S-Monovette CPDA

ФСЗ 2009/04702

ACD / CPDA / для перекрестной пробы, объем 5.6 / 8.5
мл, размер 13×90 мм / 15×92 мм, цветовой код
желтый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	ACD / CPDA / для перекрестной пробы
Объем	5.6 / 8.5 мл
Размер	13×90 мм / 15×92 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные S-Monovette CPDA - определение групп крови и консервация клеток.

Пробирки применяются в трансфузиологии для серологического исследования крови в целях определения совместимости (перекрестные пробы) при переливаниях крови, а также для консервации клеток на срок до 35 дней аналогично сроку годности консервированных компонентов.


Наполнитель: CPDA (лимонная кислота + цитрат натрия + фосфат натрия + декстроза + аденин).

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. № прозрачная этикетка	Кат. № бумажная этикетка
5.6 мл	13×90 мм	CPDA	-	04.1938.001
8.5 мл	15×92 мм	CPDA	-	01.1610.001

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)


Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

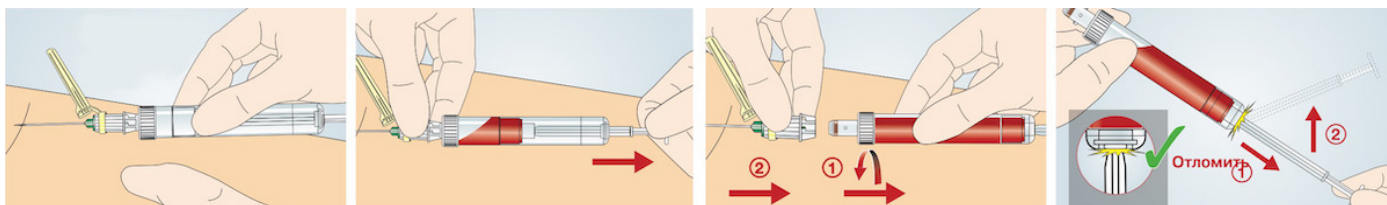

- а) Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.
- б) Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
- в) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
- г) Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

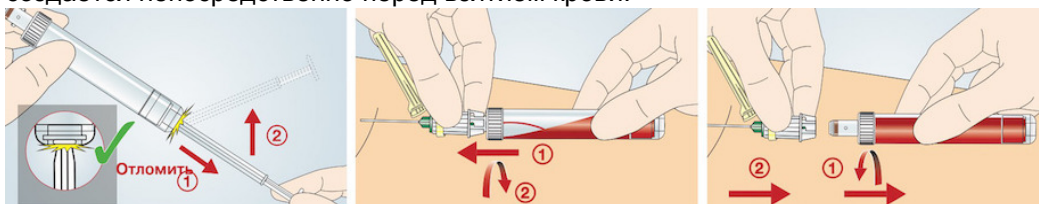

- а) Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
- б) Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
- в) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.