

Пробирка вакуумная S-Monovette Na фторид + ЭДТА

ФСЗ 2009/04702

для глюкозы, объем 1.2 / 2.6 / 2.7 мл, размер 13×75 мм / 8×66 мм / 11×66 мм / 13×65 мм, цветовой код желтый / серый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	1.2 / 2.6 / 2.7 мл
Размер	13×75 мм / 8×66 мм / 11×66 мм / 13×65 мм
Цветовой код	желтый / серый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные S-Monovette Na фторид + ЭДТА - для определения содержания глюкозы.


Наполнитель: Na фторид (1.0 мг/мл крови) + ЭДТА (1.2 мг/мл крови).

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. № прозрачная этикетка	Кат. № бумажная этикетка
1.2 мл	8×66 мм	NaF + ЭДТА	-	06.1665.001
2.6 мл	13×65 мм	NaF + ЭДТА	04.1903	04.1903.001
2.7 мл	11×66 мм	NaF + ЭДТА	05.1073	05.1073.001
2.7 мл	13×75 мм	NaF + ЭДТА	04.1918	04.1918.001

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)


Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

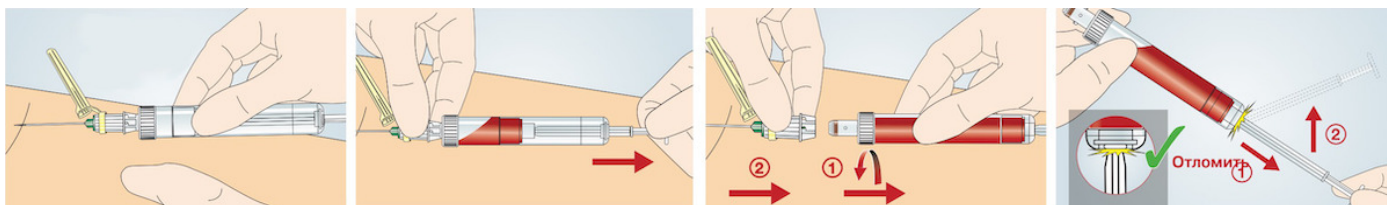

- а) Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.
- б) Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
- в) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
- г) Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

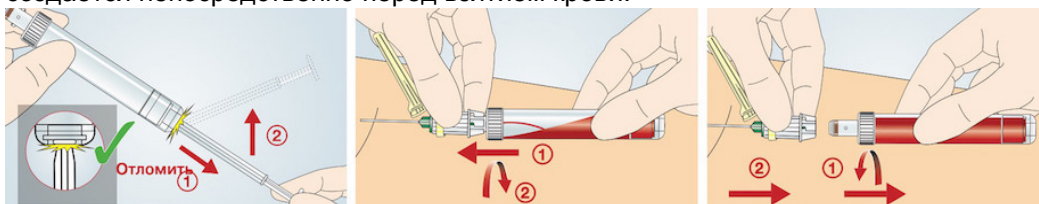

- а) Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
- б) Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
- в) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.