

Пробирка вакуумная S-Monovette PFA с цитратом натрия 3.8%

ФСЗ 2009/04702

цитрат натрия, объем 3.8 мл, размер 13×65 мм,
цветовой код голубой, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	3.8 мл
Размер	13×65 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные S-Monovette PFA - определение функции тромбоцитов.

Пробирки разработаны специально под требования измерительной системы PFA Siemens Healthineers, чтобы обеспечить точный анализ функций тромбоцитов.


Наполнитель: цитрат натрия 3.8%, 0.129M (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. № прозрачная этикетка	Кат. № бумажная этикетка
3.8 мл	13×65 мм	цитрат натрия 3.8%	-	04.1910.001

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)

Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

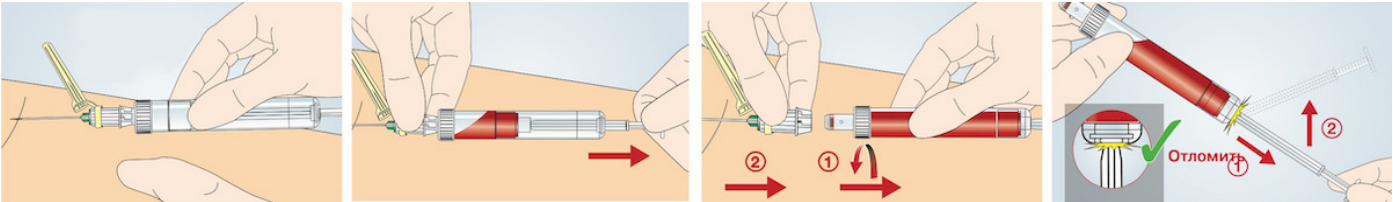


а) Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.

- b) Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
- c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
- d) Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

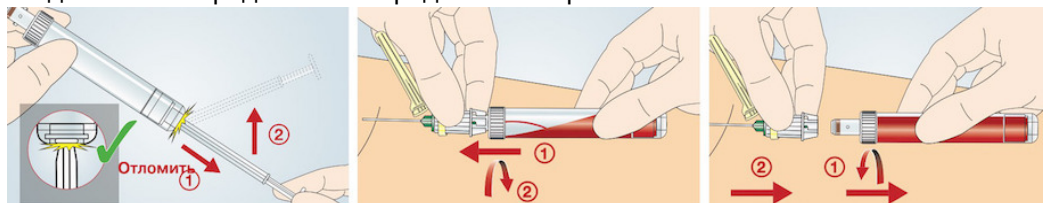

- a) Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
- b) Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
- c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.