

Пробирка вакуумная S-Monovette с гепарином натрия

ФСЗ 2009/04702

гепарин натрия, объем 2.6 / 7.5 мл, размер 13×65 мм / 15×92 мм, цветовой код зеленый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Объем	2.6 / 7.5 мл
Размер	13×65 мм / 15×92 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные S-Monovette с гепарином натрия - предназначены для исследования плазмы.


Наполнитель: гепарин натрия.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. № прозрачная этикетка	Кат. № бумажная этикетка
2.6 мл	13×65 мм	Na-гепарин	-	04.1913.100
7.5 мл	15×92 мм	Na-гепарин	-	01.1613.100

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)

Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

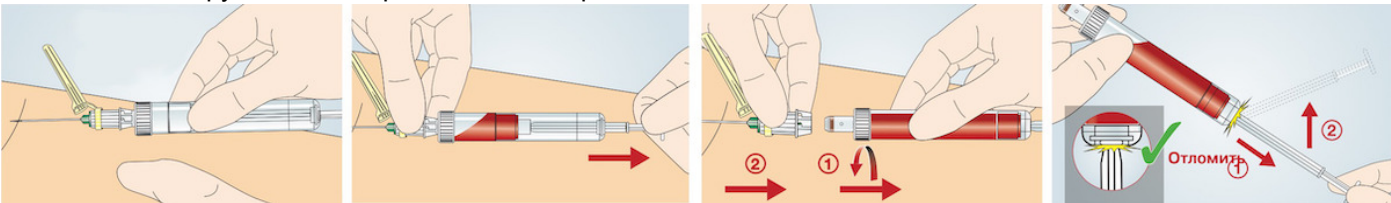


а) Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.

- b) Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
- c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
- d) Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

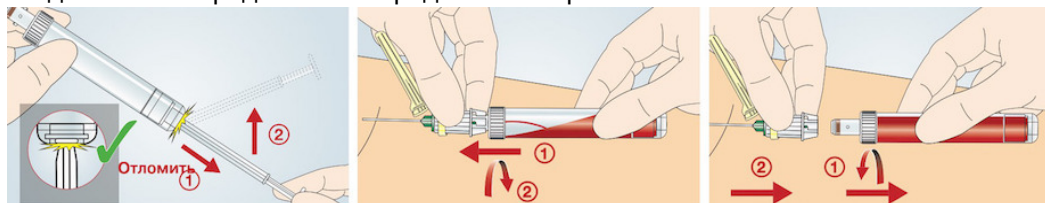

- a) Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
- b) Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
- c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.