

## Пробирка вакуумная S-Monovette с K2 ЭДТА и гелем

ФСЗ 2009/04702

K2 ЭДТА и гель, объем 4.9 / 7.5 мл, размер 13×90 мм / 15×92 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



### Характеристики

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Тип          | K2 ЭДТА и гель      |
| Объем        | 4.9 / 7.5 мл        |
| Размер       | 13×90 мм / 15×92 мм |
| Цветовой код | фиолетовый          |
| Материал     | пластик             |

### Описание

**Пробирки вакуумные S-Monovette с K2 ЭДТА и гелем** - содержат ЭДТА (1.6 мг/мл крови) и гель для создания разделительного слоя между клетками крови и плазмой.


**Наполнитель:** K2 ЭДТА + разделительный гель.

| Объем  | Размер   | Наполнитель    | Кат. №<br>прозрачная этикетка | Кат. №<br>бумажная этикетка |
|--------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 4.9 мл | 13×90 мм | K2 ЭДТА + гель | -                             | 04.1932.001                 |
| 7.5 мл | 15×92 мм | K2 ЭДТА + гель | -                             | 01.1621.001                 |

### ЗАБОР КРОВИ

**1. Аспирационная техника** (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)

Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

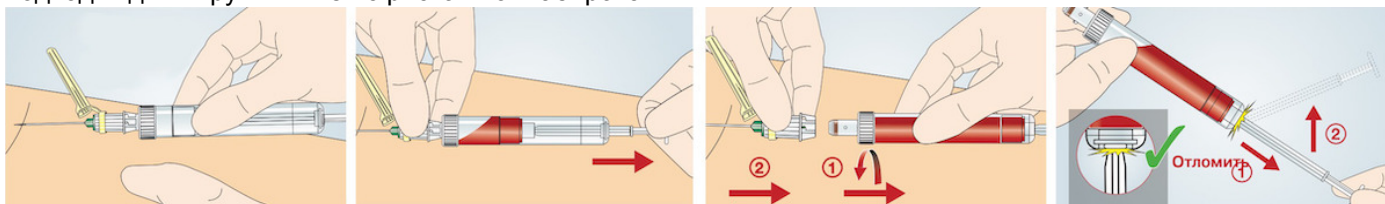


а) Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.

- b) Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
- c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
- d) Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

## 2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

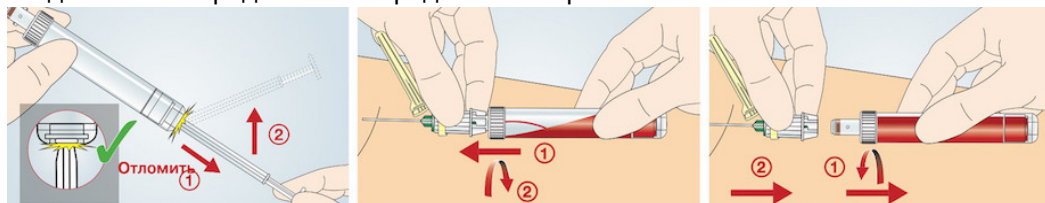

- a) Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
- b) Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
- c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.