

Пробирка вакуумная S-Monovette с КЗ ЭДТА

ФСЗ 2009/04702

КЗ ЭДТА, объем 1.2 / 1.6 / 1.8 / 2.6 / 2.7 / 3.4 / 4.0 / 4.9 / 7.5 мл, размер 13×75 мм / 8×66 мм / 11×66 мм / 13×65 мм / 13×90 мм / 15×75 мм / 15×92 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	1.2 / 1.6 / 1.8 / 2.6 / 2.7 / 3.4 / 4.0 / 4.9 / 7.5 мл
Размер	13×75 мм / 8×66 мм / 11×66 мм / 13×65 мм / 13×90 мм / 15×75 мм / 15×92 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные S-Monovette с КЗ ЭДТА - предназначены для гематологических исследований.


Наполнитель: КЗ ЭДТА.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. № прозрачная этикетка	Кат. № бумажная этикетка
1.2 мл	8×66 мм	КЗ ЭДТА	-	06.1664.001
1.6 мл	11×66 мм	КЗ ЭДТА	05.1081	05.1081.001
1.8 мл	13×65 мм	КЗ ЭДТА	04.1951	04.1951.001
2.6 мл	13×65 мм	КЗ ЭДТА	04.1901	04.1901.001
2.7 мл	11×66 мм	КЗ ЭДТА	05.1167	05.1167.001
2.7 мл	13×75 мм	КЗ ЭДТА	04.1917	04.1917.001
3.4 мл	13×65 мм	КЗ ЭДТА	04.1914	04.1914.001
4.0 мл	15×75 мм	КЗ ЭДТА	03.1068	03.1068.001
4.9 мл	13×90 мм	КЗ ЭДТА	04.1931	04.1931.001
7.5 мл	15×92 мм	КЗ ЭДТА	-	01.1605.001

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)


Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

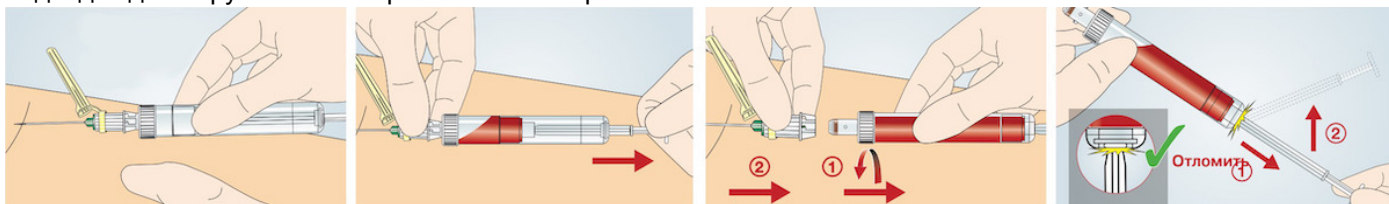

- Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.
- Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
- После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
- Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

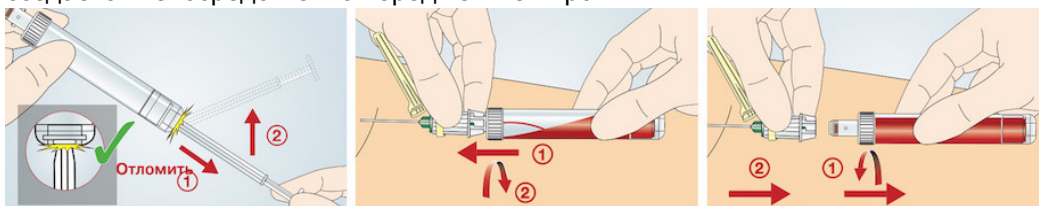

- Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.

- b) Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
- с) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.