

Пробирка вакуумная S-Monovette с цитратом натрия 3.2%

ФСЗ 2009/04702

цитрат натрия, объем 1.4 / 1.8 / 2.9 / 3.0 / 4.3 / 5.0 / 8.2
мл, размер 13×75 мм / 8×66 мм / 11×66 мм / 11×92 мм
/ 13×65 мм / 15×92 мм, цветовой код зеленый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.4 / 1.8 / 2.9 / 3.0 / 4.3 / 5.0 / 8.2 мл
Размер	13×75 мм / 8×66 мм / 11×66 мм / 11×92 мм / 13×65 мм / 15×92 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные S-Monovette с цитратом натрия 3.2% - для выполнения любых физиологических исследований свертываемости (Quick, РТТ, TZ, фибриноген). Необходимо точно соблюдать соотношение компонентов (1 часть цитрата + 9 частей крови).


Наполнитель: цитрат натрия 3.2%, 0.106М (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. № прозрачная этикетка	Кат. № бумажная этикетка
1.4 мл	8×66 мм	цитрат натрия 3.2%	-	06.1668.001
1.8 мл	13×75 мм	цитрат натрия 3.2%	-	04.1955.001
2.9 мл	13×65 мм	цитрат натрия 3.2%	04.1902	04.1902.001
3.0 мл	11×66 мм	цитрат натрия 3.2%	05.1165	05.1165.001
3.0 мл	13×75 мм	цитрат натрия 3.2%	04.1919	04.1919.001
4.3 мл	13×75 мм	цитрат натрия 3.2%	04.1922	04.1922.001
5.0 мл	11×92 мм	цитрат натрия 3.2%	05.1071	05.1071.001
8.2 мл	15×92 мм	цитрат натрия 3.2%	-	01.1606.001

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)


Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

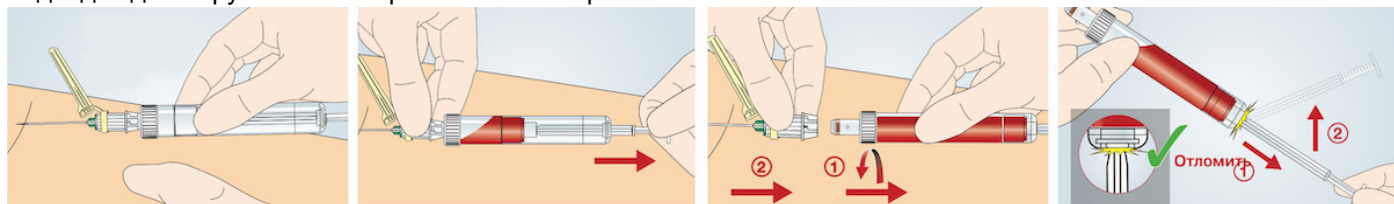

- Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.
- Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
- После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
- Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

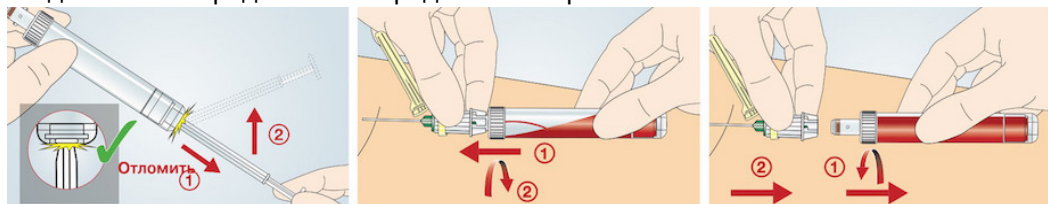

- Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
- Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
- После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.