

Пробирка вакуумная S-Monovette со CTAD

ФСЗ 2009/04702

CTAD, объем 2.9 мл, размер 13×65 мм, цветовой код
зеленый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	CTAD
Объем	2.9 мл
Размер	13×65 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные S-Monovette со CTAD - используются для контроля гепариновой терапии.

Предотвращается активация тромбоцитов на период не менее 4 часов и тем самым высвобождение белков, например, тромбоцитарного фактора 4 (PF4), β -тромбоглобулина (β TG) и ингибитора активатора плазминогена (PAI-1).

Возможно также проведение рутинного анализа свертываемости.


Наполнитель: цитрат натрия + теofilлин + аденозин + дипиридамоl.

Объем	Размер	Кат. № прозрачная этикетка	Кат. № бумажная этикетка
2.9 мл	13×65 мм	-	04.1909.001

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)


Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

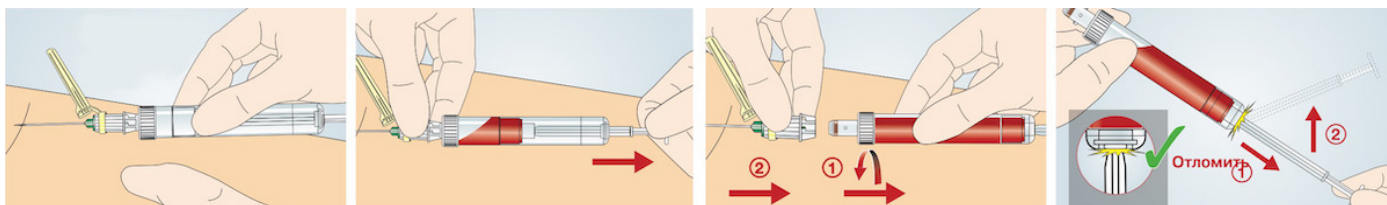

- Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.
- Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
- После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
- Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

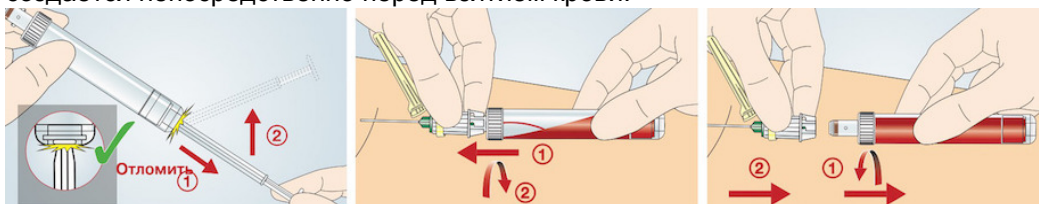

- Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
- Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
- После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.