

Пробирка вакуумная Vacutest Kima с активатором свертывания и гелем

РЗН 2013/620

активатор свертывания и гель, объем 2.0 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	2.0 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima с активатором свертывания и разделительным гелем предназначены для исследования сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии.

Размеры:


- 13×75 мм - объем крови 2 / 3.5 мл;
- 13×100 мм - объем крови 5 мл;
- 16×100 мм - объем крови 8 мл.

Характеристики:

- Перемешивание пробы: сразу после взятия крови аккуратно переверните (но не встряхивайте) пробирку 6-8 раз.
- Центрифугирование: не ранее 30 минут и не позднее 2 часов после взятия крови.
- Параметры центрифугирования: 1600-2000 g, 10 минут, при температуре 20-25 °С.
- Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Vacutest IN (утолщенные стенки)

С целью повышения качества результатов исследований свертывающей системы Vacutest KIMA выпускает пробирки с утолщенными стенками (особая технология Vacutest IN). Пробирки Vacutest IN обеспечивают более высокий уровень наполнения крови в пробирке по сравнению со стандартными пробирками аналогичного объема, что дополнительно предотвращает возможную активацию тромбоцитов.

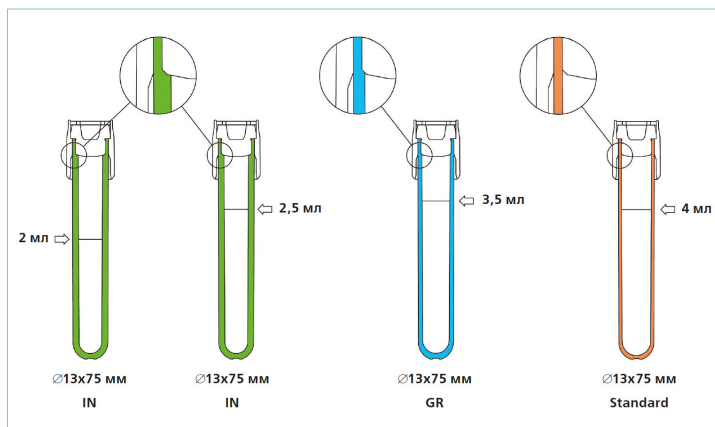

Крышка

Крышка пробирки состоит из прокалываемой пробки из бутилкаучука и внешнего пластикового колпачка. Пробка имеет углубление в месте прокола, чтобы защитить оператора от возможного контакта с кровью. Внешний колпачок выполнен из полиэтилена и служит для защиты от аэрозольного эффекта и брызг, предотвращает контакт оператора с резиновой пробкой и позволяет легко повторно надевать крышку. Особая форма внешнего колпачка позволяет использовать один и тот же держатель для пробирок с крышками диаметром 13 мм и 16 мм.

Заполнение пробирок

Дозированный вакуум обеспечивает заполнение пробирки кровью строго определенного объема. Для дополнительного контроля объема крови каждая пробирка имеет отметку уровня заполнения на этикетке. Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI допускается погрешность наполнения +/- 10% относительно отметки уровня наполнения на этикетке.



Хранение пробы:

- температура до 24 °C - не более 48 часов;
- температура 2-4 °C - 7 дней;
- температура -20°C - более 7 дней.

Срок годности: 18 месяцев.