

Пробирка вакуумная Vacutest Kima с цитратом натрия 3.2%

РЗН 2013/620

цитрат натрия, объем 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0
мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код
голубой, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima с цитратом натрия 3.2% предназначены для исследования коагуляции.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.2%, 0.109M (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

Размеры:


- 13×75 мм - объем 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 мл;
- 13×100 мм - объем 5 мл.

Характеристики:

- Перемешивание пробы: сразу после взятия крови аккуратно переверните (но не встряхивайте) пробирку 4-5 раз.
- Центрифугирование: не позднее 2-4 часов после взятия крови.
- Параметры центрифугирования: 2000-2500 g, 15-20 минут, при температуре 20-25 °C.
- Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Vacutest IN (утолщенные стенки)

С целью повышения качества результатов исследований свертывающей системы Vacutest KIMA выпускает пробирки с утолщенными стенками (особая технология Vacutest IN). Пробирки Vacutest IN обеспечивают более высокий уровень наполнения крови в пробирке по сравнению со стандартными пробирками аналогичного объема, что дополнительно предотвращает возможную активацию тромбоцитов.

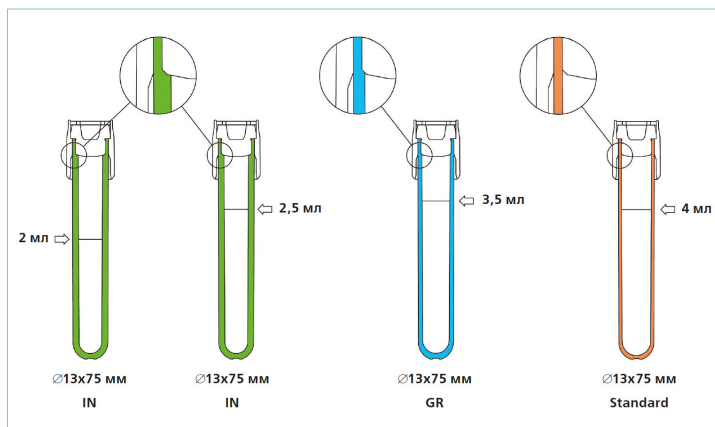

Крышка

Крышка пробирки состоит из прокалываемой пробки из бутилкаучука и внешнего пластикового колпачка. Пробка имеет углубление в месте прокола, чтобы защитить оператора от возможного контакта с кровью. Внешний колпачок выполнен из полиэтилена и служит для защиты от аэрозольного эффекта и брызг, предотвращает контакт оператора с резиновой пробкой и позволяет легко повторно надевать крышку. Особая форма внешнего колпачка позволяет использовать один и тот же держатель для пробирок с крышками диаметром 13 мм и 16 мм.

Заполнение пробирок

Дозированный вакуум обеспечивает заполнение пробирки кровью строго определенного объема. Для дополнительного контроля объема крови каждая пробирка имеет отметку уровня заполнения на этикетке. Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI допускается погрешность наполнения $\pm 10\%$ относительно отметки уровня наполнения на этикетке.



Хранение пробы после центрифугирования: время и температура хранения могут различаться в зависимости от вида исследования.

Срок годности:

- IN - 12 месяцев;
- GR - 9 месяцев;
- Standard - 6 месяцев.