

Силиконовые пластины Scar Fx для коррекции рубцовой ткани

пластырь, для лечения рубцов, нестерильный, основа
силикон, 3.75×7.5 см / 3.75×12.5 см / 3.75×22.5 см /
7.5×12.5 см / 10×20 см / 2.5×30 см / 2.5×55 см / 25×30
см

Atlantic Medical Products, США



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	для лечения рубцов
Вид	нестерильный
Основа	силикон
Размер	3.75×7.5 см / 3.75×12.5 см / 3.75×22.5 см / 7.5×12.5 см / 10×20 см / 2.5×30 см / 2.5×55 см / 25×30 см

Описание

Средства для дермато-косметологии и пластической хирургии: изделия для коррекции рубцовой ткани: пластины силиконовые Скар Фикс (Scar Fx).

Состав и форма выпуска:

100% медицинский силикон. Пластины выпускаются 12 различных размеров и форм.

Показания к применению:

Профилактика развития и лечение старых келоидных и гипертрофических рубцов любой этиологии: хирургических, посттравматических, ожоговых.

Противопоказания:

Не применять на слизистой поверхности, а также на открытые незажившие раны, так как это может привести к нарушению естественной регенерации кожных покровов. Не применять совместно с препаратами для лечения кожных заболеваний и косметическими продуктами. При появлении раздражения прекратить использование и проконсультироваться с врачом.


Применение:

- пластина накладывается на полностью заживший, сухой рубец на ночь на 10-12 часов;
- шрам всегда должен оставаться чистым и сухим; использование талька, мази, увлажняющих кремов либо иных медицинских препаратов одновременно с силиконовой пластиной не рекомендовано.
- снять защитные пленки с обеих сторон силиконовой пластины;

- клейкой стороной поместить пластину на рубец; **пластина должна полностью покрывать шрам и выходить за его края приблизительно на 1-1.5 см.** Для предотвращения смещения пластины зафиксировать ее гипоаллергенным лейкопластырем, бинтом или иным удобным способом;

Наилучший результат достигается при комплексной терапии с кремом Скар Эстетик (Scar Esthetique): пластины накладываются на 10-12 часов на ночь, крем наносится 3-4 раза в день массажными движениями. Результаты применения становятся заметны индивидуально, через 72 часа – 3 месяца. В некоторых случаях курс лечения может продолжаться до года.

Кат. №	Размер (форма)
11503	3.75×7.5 см
11505	3.75×12.5 см
11509	3.75×22.5 см
10305	7.5×12.5 см
10408	10×20 см
10112	2.5×30 см
10122	2.5×55 см
11012	25×30 см
1000	Breast Circle (круг)
11234	Breast
13456	Lollipop Breast (ключ)
15678	Breast Anchor (якорь)

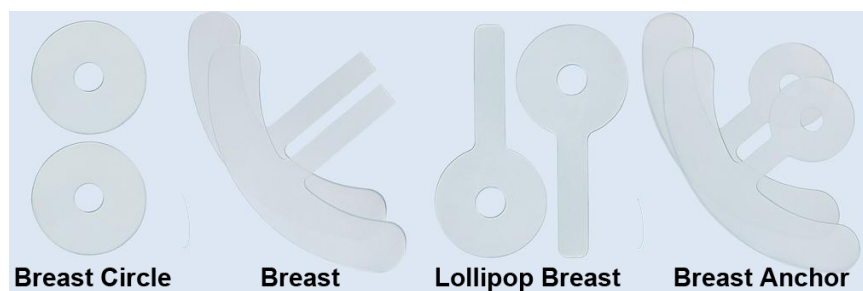

Побочные действия:

Силиконовые пластины не оказывают системного воздействия на организм, работая лишь на поверхностном уровне. Иногда может появиться зуд, который чаще всего связан с физиологической природой шрамообразования. Редко: местные кожные реакции. При появлении любыхстораживающих симптомов следует проконсультироваться с врачом.

Уход за пластинами:

Перед применением необходимо тщательно промыть пластину Скар Фикс в мыльной теплой воде. После этого промывать пластину мыльным раствором как минимум один раз в неделю. Для хранения пластины используйте пакет с застежкой.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре.