


Тесты BioMerieux Etest для определения чувствительности к антибиотикам

ФСЗ 2010/08614

для открытых систем, определение чувствительности к антибиотикам, 30 шт. или 100 шт. в индивидуальной блистерной упаковке / 30 шт. или 100 шт. в пенопластовом картридже

BioMerieux, Франция

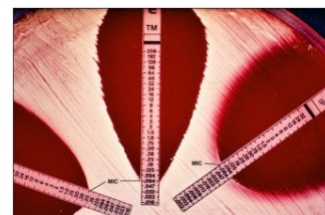


Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	определение чувствительности к антибиотикам
Упаковка	тест-полоска
Фасовка	30 шт. или 100 шт. в индивидуальной блистерной упаковке / 30 шт. или 100 шт. в пенопластовом картридже

Дополнительные характеристики

Etest - это пластиковая полоска со стабильным градиентом из 15 концентраций антимикробного препарата, нанесенным с использованием инновационной технологии сухой химии. Etest применяется для определения Минимальной Ингибирующей Концентрации (МИК) антибиотиков, противогрибковых и противотуберкулезных препаратов.

Etest являются всемирно признанным экономически эффективным инструментом для определения МИК посредством 15 последовательных разведений антимикробных препаратов. В настоящее время доступен спектр более чем 100 антимикробных препаратов для тестирования как аэробных бактерий, так и прихотливых микроорганизмов, таких как пневмококки, гонококки, *H. pylori*, менингококки, гонококки, анаэробы, грибы и микобактерии.

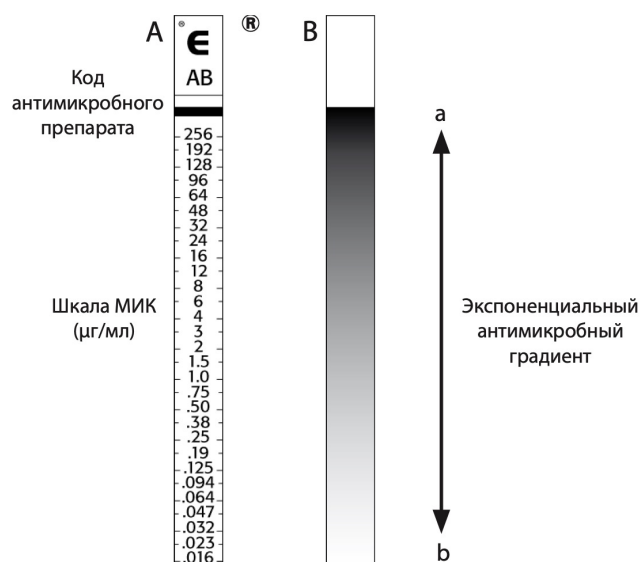

Области применения Etest

- Определение МИК для прихотливых, медленно растущих или требующих сложных условий культивирования микроорганизмов и назначить лечение в случаях с особо тяжелыми пациентами или специфическими инфекциями.
- Определение/подтверждение специфической устойчивости фенотипов, таких как β -лактамазы расширенного спектра действия (БЛРС), метало- β -лактамазы (МБЛ), AmpC и GISA/hGISA.
- Определение низкого уровня резистентности.
- Тестирование активности применяемых в ежедневной практике или новых, недавно выпущенных, антимикробных препаратов.
- Подтверждение сомнительных результатов, полученных при определении чувствительности к антибиотикам.

Etest обеспечивают высокую клиническую значимость для:

- подтверждения эффективности и коррекции антимикробной терапии;
- рационального использования антимикробных препаратов в учреждении;
- принятия решения в выборе препарата и его дозировки (фармакокинетика/фармакодинамика) для пациентов с инфекциями стерильных органов (например, эндокардиты), тяжелыми внутрибольничными инфекциями, хроническими инфекциями (такими как кистозный фиброз) и для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Чувствительность к антибиотикам: Etest MBL MP/MPI Etest Amikacin AK 256 Etest Amoci/clav XL 256 Etest Amoxicillin VH / AC 256 Etest Ampicillin AM 256 Etest Benzylpenicillin VH / PG 256 Etest Benzylpenicillin VB / PGL 32 Etest Cefotaxime VH / CT 256 Etest Cefotaxime YB / CTL 32 Etest Ceftazidime TZ 256 Etest Ceftriaxone YB / TXL 32 Etest Ciprofloxacin CI 32 Etest Clindamycin CM 256 Etest Erythromycin EM 256 Etest Gentamicin VB / GM 256 Etest Imipenem IP 32 32 Etest Levofloxacin LE 32 Etest Meropenem MP 32 Etest Metronidazole MZH 256 Etest Oxacilline OX 256 Etest PIP/TAZO/CON-4 PTC 256 Etest Teicoplanin TP 256 Etest Tetracycline TC 256 Etest Tigecycline TGC 256 Etest Vancomycin VA 256 Etest Amoxicillin AC 256 Etest Amoxi/clav 2/1 XL 256 Etest Amikacin AK 256 Etest Ampicillin AM 256 Etest Azithromycin AZ 256 Etest Aztreonam AT 256 Etest Aztreonam AT 256 Etest Aztreonam AT 256 Etest Aztreonam AT 256 Etest Ampicil/sulb 2/1 AB 256 Etest Benzylpenicillin PG 256 Etest Benzylpenicillin PGL 32 Etest Cephalothin CE 256 Etest Cefaclor CF 256 Etest Cefepime PM 256 Etest Cefotaxime CT 256 Etest Cefotaxime CTL 32 Etest Ceipodoxime PX 256 Etest Cefotetan CN 256 Etest Cefpirome CR 256 Etest Cefoxitin FX 256 Etest Ceftriaxone TX 256 Etest Ceftazidime TZ 256 Etest Cefuroxime XM 256	Etest Minocycline MC 256 Etest Mupirocin MU 1024 Etest Nalidixic-acid NA 256 Etest Netilmicin NC 256 Etest Norfloxacin NX 256 Etest Ofloxacin OF 32 Etest Oxacillin OX 256 Etest Pip/tazo/con-4 PTC 256 Etest Piperacillin PP 256 Etest Teicoplanin TP 256 Etest Tetracycline TC 256 Etest Ticar/clav-con-2 TLC 256 Etest Tobramycin TM 256 Etest Trimethoprim TR 32 Etest Trim sulfa 1/19 TS 32 Etest Vancomycin VA 256 Etest Itraconazole IT 32 Etest Ketoconazole KE 32 Etest Rifampicin RI32 Etest Rifampicin RI 32 Etest Amphotericin-B AP 32 Etest Streptomycin SM 1024 Etest Levofloxacin LE 32 Etest Ethionamide ET 256 Etest Ethambutol EB 256 Etest Kanamycin KM 256 Etest Isoniazide IZ 256 Etest Bacitracin BA 256 Etest Quinupri dalfopri QDA 32 Etest Enrofloxacin EF 32 Etest Moxifloxacin MX 32 Etest Fosfomycin FM 1024 Etest Spectinoinycin SC 1024 Etest Cefopera sulb 2/1 CPS 256 Etest Cefixime IX 256 Etest Metronidazole MZH 256 Etest Gatifloxacin GA 32 Etest Gemifloxacin GEM 32 Etest Nitrofurantoin N1512 Etest Linezolid LZ 256 Etest Ertapenem ETP 32 Etest Anidulafungin AND 32 Etest Posaconazole POS 32 Etest ESBL CT/CTL 16/1 Etest Caspofungin CS 32 Etest ESBL TZ/TZL 32/4 Etest Voriconazole VO 32 Etest Tobramycin TM 1024 Etest Polymyxin B PO 1024	
Etest Ceftriaxone TXL 32 Etest Chloramphenicol CL 256 Etest Ciprofloxacin CI 32	Etest Tigecycline TGC 256 Etest Sulfamethoxazole SX 1024 Etest MBL IP IPI256/64	https://xn--80aajbe5ajcy1b.xn--p1ai/promo