

Экспресс-тест Panbio COVID-19 Ag назофарингеальный

21.20.23.110

COVID-19, тестов 25 шт.

Abbott Rapid Diagnostics, Германия



Характеристики

COVID-19	Да
Количество тестов	25 шт.

Дополнительные характеристики

Экспресс-тест Panbio COVID-19 Ag назофарингеальный для пациентов с подозрением активной стадии COVID-19.

Каталожный номер: 41FK10 (назофарингеальный мазок) – 25 тестов в наборе.


Время процедуры: 15 минут.

Тип образца: назофарингеальный мазок.

Чувствительность: 91.4% (94.1% образцы, где Ct ≤33).

Специфичность: 99.8%.

Процедура (полное описание в инструкции)

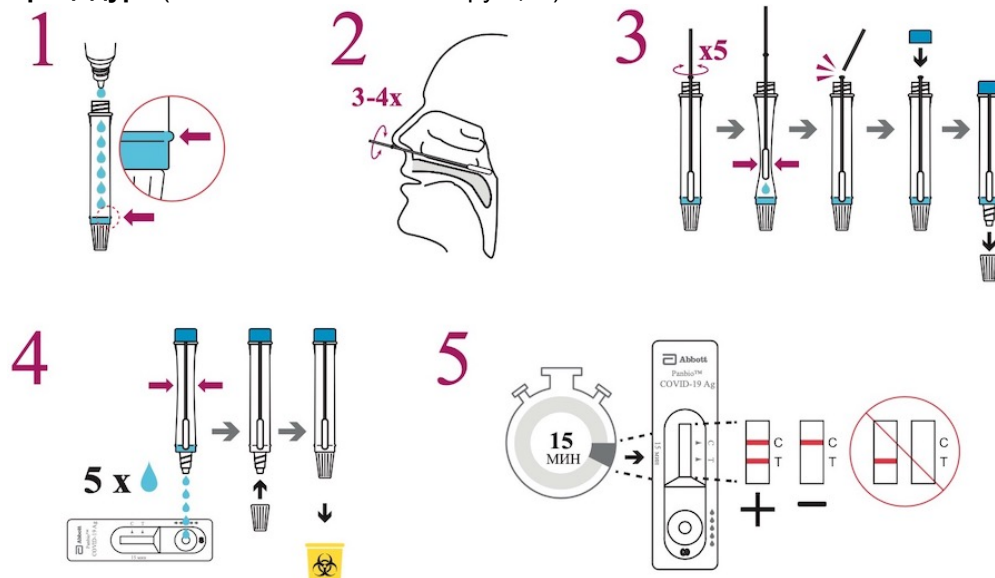

Назначение

In vitro экспресс-тест для качественного определения антигена (Ag) SARS-CoV-2 в образце назофарингеального мазка людей с клиническими и/или эпидемиологическими проявлениями COVID-19. Panbio™ COVID-19 Ag экспресс-тест только для профессионального применения и предназначен для использования в качестве вспомогательного средства при диагностике инфекции SARS-CoV-2. Возможно применение не только в лабораториях, при условии соответствия требованиям инструкции и местным нормативно-правовым актам. Тестирование подразумевает предварительный результат (отрицательный результат не исключает наличия SARS-CoV-2) и не может являться единственным фактом для постановки диагноза. Отрицательные результаты должны быть объединены с клиническими наблюдениями, историей пациента и эпидемиологической информацией. Тест не предназначен для использования в качестве скринингового теста доноров на SARS-CoV-2.

Пробирка для выделения



- Полностью закрыта и пригодна к утилизации (без дополнительных манипуляций).
- Позволяет отломать тампон таким образом, чтобы не доставать его из пробирки, что сводит к минимуму воздействие на персонал.

Состав набора:

- 25 тест-кассет
- 1 буфер (9 мл в 1 фл.)
- 25 пробирок экстракционных
- 25 колпачков для пробирок экстракционных
- 1 положительный контрольный образец
- 1 отрицательный контрольный образец
- 25 стерильных назофарингеальных тампонов (тупферов) для сбора образцов
- 1 штатив
- 1 краткое руководство
- 1 инструкция по применению