

Линза Гольдмана Ocular Three Mirror Universal Diagnostic

ФС № 2004/760 до 09.07.2014

гониоскоп, линза Гольдмана, увеличение изображения
0.93х, контактный диаметр 15 / 17 / 18 / 20 мм, наклон
граней 59° / 67° / 73°

Ocular Instruments, Inc., США




Характеристики

Назначение	гониоскоп
Линза Гольдмана	Да
Увеличение изображения	0.93х
Контактный диаметр	15 / 17 / 18 / 20 мм
Углы наклона граней	59° / 67° / 73°

Описание

Ocular Three Mirror Universal Diagnostic (OG3M) – трехзеркальная линза Гольдмана. Одно зеркало позволяет использовать линзу как гоноскоп – проводить осмотр угла передней камеры. Два других зеркала используются при осмотре периферии сетчатки. Через центр линзы можно осматривать задний полюс глазного дна, поле обзора через центральную оптическую часть линзы Гольдмана составляет 36°.

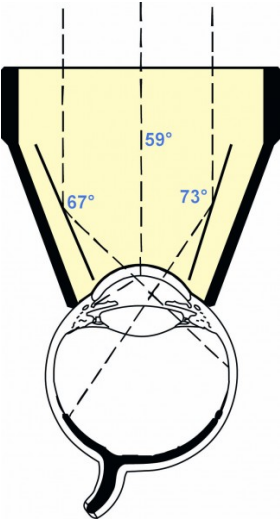

Модификации линз Ocular Three Mirror Universal Diagnostic

Параметры	OG3M	OG3MI	OG3MP	OG3MF	OG3MS
Описание	универсальная	15 мм	17 мм	с фланцем	короткая
Контактный диаметр	18 мм	15 мм	17 мм	20 мм	18 мм
Увеличение	0.93x				
Высота	32 мм	28 мм	26 мм	33 мм	24 мм
Углы наклона граней	59° / 67° / 73°				