


Ортез коленного сустава с определяемым диапазоном движения ORTEX 01

ФСЗ 2010/08003

ортез, для нижних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер XXS / XS / S / M / L / XL

Ortex spol. s.r.o., Чехия

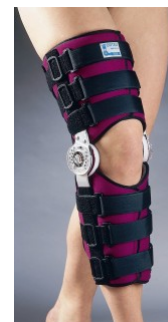

Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	дюралюминий / полиэфир / хлопок
Размер	XXS / XS / S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Показания: ортез используется для ранней реабилитации после травм и операций на коленном суставе; при повреждении связочного аппарата и менисков; дисторсии коленного сустава; состояниях после инсультов, когда пациент не способен самостоятельно ходить.

Область применения: ортопедия, травматология, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Основу ортеза составляет одноосный шарнир с регулируемым углом флексии-экстензии до 10° (у размера S до 15°). Установка желаемого диапазона движения проводится перед применением. Бедренные и икроножные текстильные элементы состоят из трех панелей, путем перестановки которых достигается надлежащая величина окружности.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: текстильные части внутренней стороны изготовлены из 100% хлопкового трикотажа, наружные части – из сложного полиэфира. Металлические планшеты и шарниры изготовлены из дюралюминия.

Советы по уходу: бережная ручная стирка при +40° С без отжима, предварительно отстегнув планшеты с шарнирами и зафиксировав ремни на застежки «контакт».

Ортез является универсальным как для правой, так и левой ноги. Кронштейны ортеза можно профилировать.