


Пробирка вакуумная Greetmed с активатором свертывания и гелем

ФСЗ 2012/11857

активатор свертывания и гель, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 /
5.0 / 6.0 / 7.0 / 9.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код желтый, пластик / стекло

Greetmed, Китай

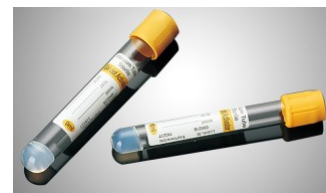

Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Greetmed с активатором свертывания и гелем используются для исследования сыворотки.

Внутренняя часть пробирки покрыта активатором свертывания (диоксид кремния) для ускорения свертывания. На дне пробирки присутствует **полиэфирный гель**, который при центрифугировании образует барьер, отделяющий сыворотку от фибрина и клеток.

Наполнитель: активатор свертывания + разделительный гель.

Код: GT210-1008.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 4 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 5 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

В упаковке: 1200 шт.