Пробирка вакуумная S-Monovette без наполнителя

ФСЗ 2009/04702



без наполнителя, объем 2.7 / 4.5 / 4.9 / 7.5 мл, размер 11×66 мм / 11×92 мм / 13×90 мм / 15×92 мм, цветовой код белый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия

Характеристики

Тип	без наполнителя
Объем	2.7 / 4.5 / 4.9 / 7.5 мл
Размер	11×66 мм / 11×92 мм / 13×90 мм / 15×92 мм
Цветовой код	белый
Материал	пластик

Описание


Пробирки вакуумные S-Monovette без реагента.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. № бумажная этикетка
2.7 мл	11×66 мм	-	05.1729.001
4.5 мл	11×92 мм	-	05.1727.001
4.9 мл	13×90 мм	-	04.1926.001
7.5 мл	15×92 мм	-	01.1728.001

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)


Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

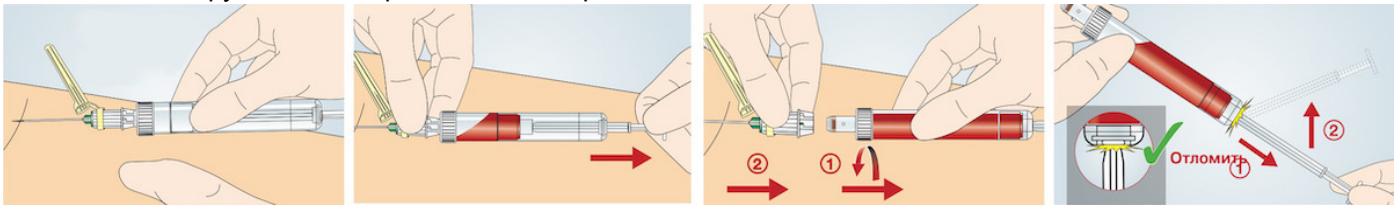

а) Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.

b) Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
d) Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)
Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

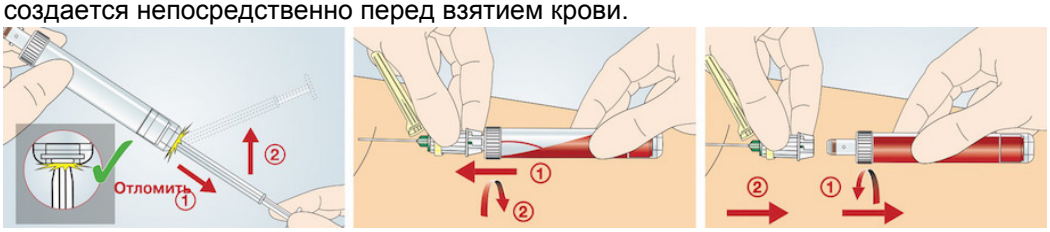

a) Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
b) Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.