Пробирка вакуумная S-Monovette с активатором свертывания и гранулами

ФСЗ 2009/04702

активатор свертывания, объем 1.2 / 2.6 / 2.7 / 4.0 / 4.5 / 4.9 / 5.5 / 7.5 мл, размер 13×75 мм / 8×66 мм / 11×66 мм / 11×92 мм / 13×65 мм / 13×90 мм / 15×75 мм / 15×92 мм, цветовой код белый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	1.2 / 2.6 / 2.7 / 4.0 / 4.5 / 4.9 / 5.5 / 7.5 мл
Размер	13×75 мм / 8×66 мм / 11×66 мм / 11×92 мм / 13×65 мм / 13×90 мм / 15×75 мм / 15×92 мм
Цветовой код	белый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные S-Monovette с активатором свертывания - предназначены для исследования сыворотки. Свертывание крови обычно завершается через 20-30 минут, после чего пробу можно центрифугировать.


Наполнитель: активатор свертывания (силикат) + гранулы.
Центрифугирование:
- 2000-2500 g - 10 минут;
- 3000 g - 6 минут;
- 3500-4000 g - 4 минуты.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. № прозрачная этикетка	Кат. № бумажная этикетка
1.2 мл	8×66 мм	Активатор свертывания + гранулы	-	06.1663.001
2.6 мл	13×65 мм	Активатор свертывания + гранулы	04.1904	04.1904.001
2.7 мл	11×66 мм	Активатор свертывания + гранулы	05.1557	05.1557.001
2.7 мл	13×75 мм	Активатор свертывания + гранулы	-	04.1943.001
4.0 мл	13×75 мм	Активатор свертывания + гранулы	04.1924	-
4.5 мл	11×92 мм	Активатор свертывания + гранулы	05.1104	05.1104.001
4.9 мл	13×90 мм	Активатор свертывания + гранулы	04.1934	04.1934.001
5.5 мл	15×75 мм	Активатор свертывания + гранулы	03.1397	03.1397.001
7.5 мл	15×92 мм	Активатор свертывания + гранулы	01.1601	01.1601.001

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)

Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

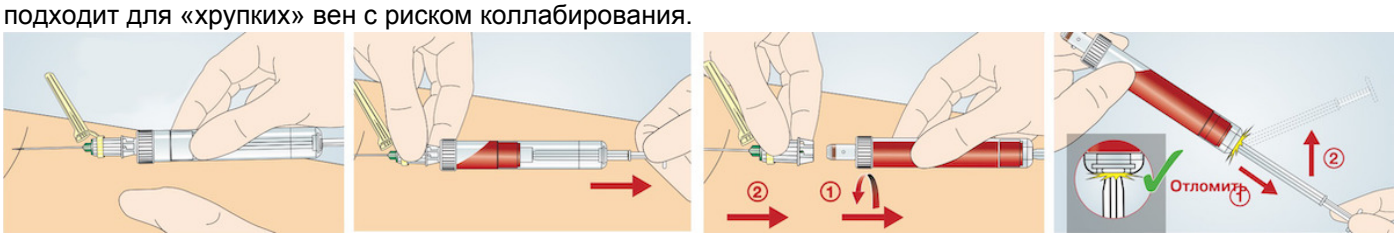


a) Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.

b) Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую

пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
d) Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)
Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

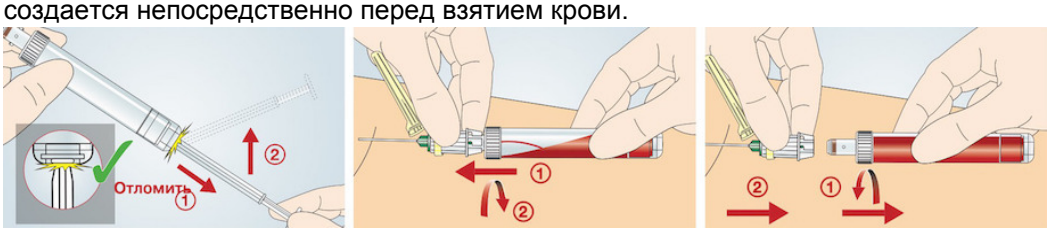

a) Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
b) Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
c) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.