


## Реагент для протромбинового времени Diagon Dia-PT LIQUID

ФСЗ 2012/12611

система открытая, для анализаторов Diagon серия  
Coag, протромбиновое время

Diagon Kft., Венгрия

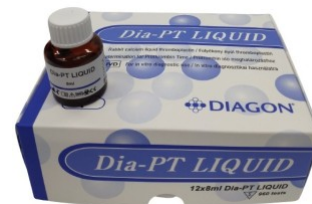

### Характеристики

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Система              | открытая             |
| Для анализаторов     | Diagon серия Coag    |
| Параметр определения | протромбиновое время |
| Фасовка              | 12 фл x 8 мл         |

### Описание

- Реагент для протромбинового времени **Dia-PT LIQUID** – представляет собой экстракт мозга кролика, который содержит тканевой фактор, липиды и ионы кальция. Определение ПВ по Quick является чувствительным тестом для скрининга внешнего пути свертывания крови.
- Dia-PT LIQUID в качестве реагента для ПВ высокочувствителен к антагонистам витамина К, пониженному уровню факторов внешнего пути (фактор II, V, VII и X), наследственным или приобретенным нарушениям свертывания крови и печеночной недостаточности.
- Dia-PT LIQUID оптимально использовать для предоперационного скрининга и мониторинга пероральной антикоагулянтной терапии. Реагент Dia-PT LIQUID с соответствующей дефицитной плазмой также подходит для определения активности внешнего пути свертывания (факторы II, V, VII и X).
- Dia-PT LIQUID используется для определения ПВ, проводимого ручным, полуавтоматическим и автоматическим способом и в мониторинге гепариновой терапии.

**Срок годности:** 18 мес

**Стабильность после вскрытия:** 12 суток при 2-8°C

**Каталожный номер:** 82096