Бумага

Используйте только бумагу Sony UPP-210SE/ UPP-210HD/UPT-210BL, предназначенную для данного принтера. Высокое качество печати не гарантируется при использовании какой-либо другой бумаги с устройством, и такая бумага даже может привести к повреждению устройства.

Используемая бумага

Бумага для печати имеет следующие характеристики.

Характеристики отпечатка	Тип бумаги
Носитель для термической печати (обычный)	UPP-210SE
Носитель для термической печати (высокой плотности)	UPP-210HD
Синяя прозрачная термопленка	UPT-210BL

Примечание

Использование пленки UPT-210BL с моделью UP-971AD невозможно.

Примечания относительно хранения и обращения с бумагой

Не используйте повторно
Это может привести к нарушению работы принтера и отрицательно сказаться на результатах печати.

Хранение неиспользованной бумаги

- Храните неиспользованную бумагу при температуре не более 30 °C в сухом месте, защищенном от прямого солнечного света.
- Не храните неиспользованную бумагу вблизи летучих жидкостей и не допускайте контакта с органическими летучими жидкостями, целлофановой пленкой и соединениями винилхлорида.

Загрузка бумаги

- При загрузке обращайтесь с бумагой осторожно во избежание касания печатающей поверхности пальцами. Пот и жир с рук могут привести к потере четкости изображения.
- После удаления наклейки с ведущей кромки бумаги вытяните бумагу на 15~20 см перед печатью. Оставшийся на бумаге клей с наклейки может испортить отпечаток.

Хранение отпечатков

- Во избежание выцветания и изменения цвета отпечатков храните их в сухом прохладном месте при температуре не более 30 °C.
- Храните отпечатки в полипропиленовом пакете или между листами бумаги, не содержащими пластика.
- Не храните отпечатки в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света и повышенной влажности.
- Не храните отпечатки вблизи летучих жидкостей и не допускайте контакта с целлофановой пленкой и соединениями винилхлорида.
- Во избежание выцветания не складывайте отпечатки на или под диазотипную бумагу.
- Для крепления отпечатков на другом листе бумаги используйте двустороннюю клейкую ленту или клей на водной основе.
- Не сжигайте.
- При утилизации бумаги для печати необходимо соблюдать законы соответствующего региона или страны, а также правила, действующие в больнице, где использовалось оборудование.

Загрузка бумаги в устройство


Внимание

Не прикасайтесь одновременно к схемам устройства и пациенту.
При неисправности устройство может генерировать напряжение, которое может представлять опасность для пациента.

Примечания

- При загрузке не касайтесь печатающей поверхности термобумаги для печати. Отпечатки пальцев, пот и складки на бумаге приводят к снижению качества печати.
- Используйте только бумагу для печати серии UPP-210 или пленку UPT-210BL (стр. 42).
- Если используется устройство серии UPP-210, настройте параметры меню в зависимости от типа загруженной бумаги (стр. 42).

1 Нажмите на выключатель питания для включения устройства.

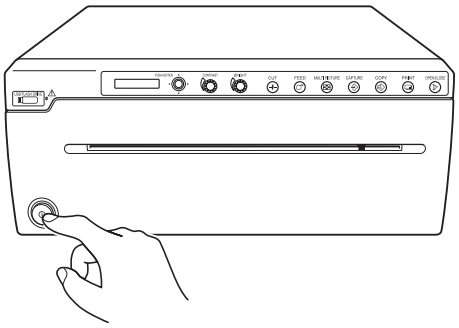


На ЖК-дисплее появится сообщение “SONY UP-991AD” для модели UP-991AD и “SONY UP-971AD” для модели UP-971AD.

Примечания


- Если бумага для печати не загружена, включается янтарная подсветка ЖК-дисплея и появляется сообщение “EMPTY”.
- Если открыта дверца отсека бумаги, включается янтарная подсветка ЖК-дисплея и появляется сообщение “DOOR”.

2 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE для открытия дверцы отсека бумаги.

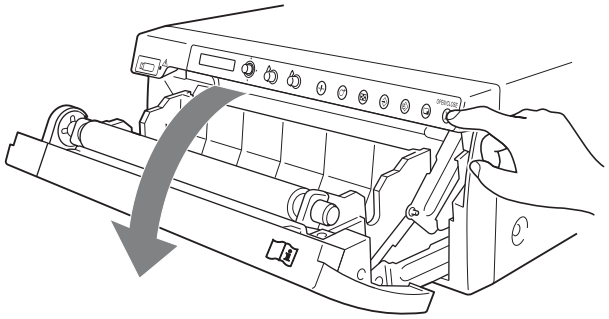

3 Поместите рулон бумаги для печати в лоток.


При использовании UPP-210SE/UPP-210HD

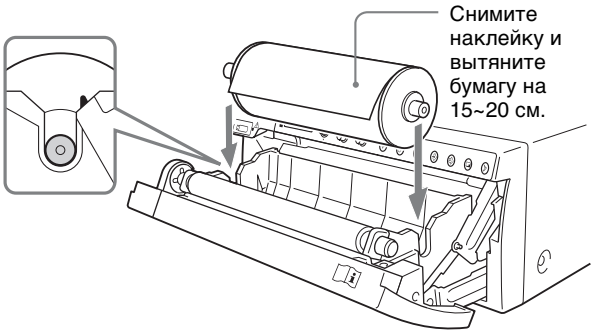

Поместите бумагу теплочувствительной стороной вверх. Печать не будет выполняться, если бумага перевернута.

При использовании термопленки UPT-210BL

* **Не может использоваться с моделью UP-971AD. Это может нарушить нормальную работу.**

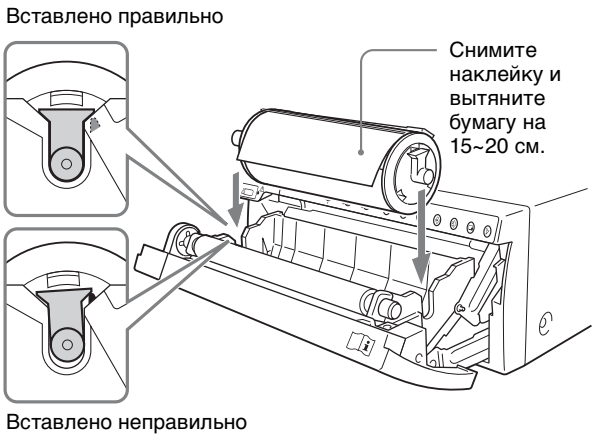


Поместите бумагу теплочувствительной стороной вверх. Печать не будет выполняться, если бумага перевернута.

4 Вставьте бумагу в паз лотка для бумаги и вытяните ее через выходное отверстие для бумаги.


Примечание

Размещайте бумагу вблизи центра паза лотка для бумаги (внутри направляющей). Если поместить бумагу с краю паза лотка для бумаги, возможно застревание бумаги.

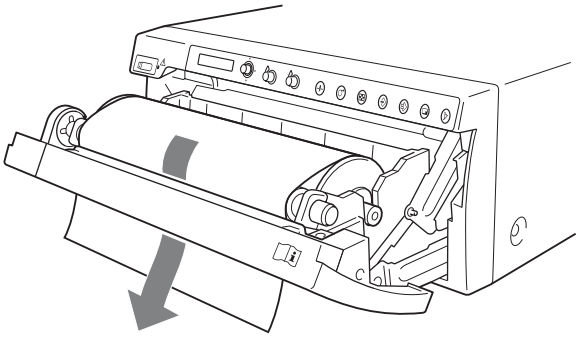

Примечание

Вытяните бумагу, чтобы устранить провисание и убрать возможные складки.

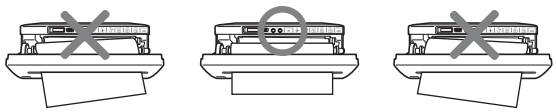


5 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE для закрытия дверцы отсека бумаги.
Кроме того, можно нажать на дверцу отсека бумаги для ее закрытия.

6 Уберите ведущую кромку бумаги.


UP-991AD

После загрузки бумаги нажмите кнопку FEED для выдачи 15 ~ 20 см бумаги, а затем кнопку CUT для ее удаления.

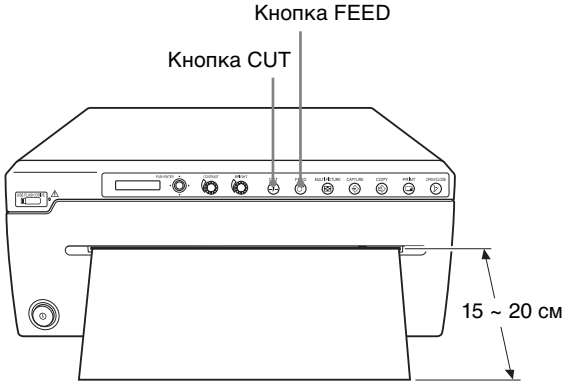

UP-971AD

После загрузки бумаги нажмите кнопку FEED для выдачи 15 ~ 20 см бумаги. Затем используйте механизм отрезания бумаги для ее удаления.

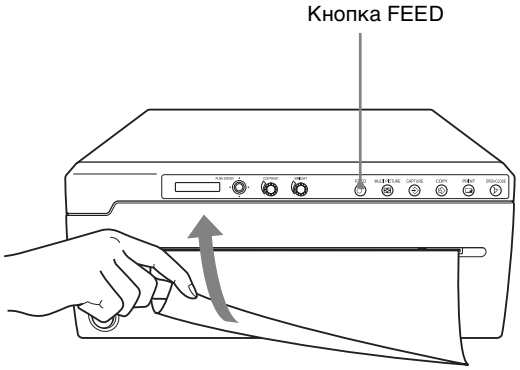

Примечание

Для использования пленки UPT-210BL после печати на бумаге UPP-210SE/UPP-210HD выполняйте очистку термопечатающей головки перед печатью. В противном случае возможно появление тонких горизонтальных полос на бумаге.