


СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ С ПАКЛИТАКСЕЛЕМ LUC-CHOPIN² с системой доставки Rapid Exchange (Rx)

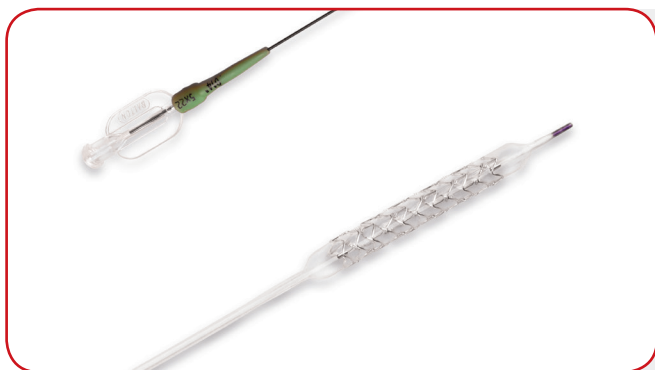

Стент LUC-CHOPIN², первый польский коронарный стент DES с паклитакселем, был создан в результате многих лет лабораторных и клинических исследований.

Уникальная технология покрытия стента LUC-CHOPIN², созданная компанией БАЛТОН, позволяет получить самый эластичный слой биodeградируемого полимера, носителя паклитакселя – вещества обладающего антипролиферативным действием.

Слои полимера освобождают паклитаксель в контролируемом по времени процессе их медленной биodeградации (продолжающейся 6 недель), приостанавливающей процесс формирования неоинтимы. Преклинические и клинические исследования, проведенные во многих медицинских центрах в Польше и в мире, доказали надежность, безопасность и эффективность стентов LUC-CHOPIN².

Технические данные

Материал	Сталь 316L
Антипролиферативное средство	Паклитаксель
Видимость при флюороскопии	Хорошая
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасное
Рекомендованный проводник	Макс..014"/(0.36 мм)
Минимальный направляющий катетер	5F(.056")*
Время сдувания баллона	Очень короткое
Сокращение длины после имплантации	< 0.5%
Уменьшение просвета	< 2%
Радиальная сила	Высокая
Легкость продвижения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.040"***
Диаметр проксимальной части	2.0F/0.65 мм
Диаметр дистальной части	2.7F/0.90 мм
Номинальное давление	10 атм.
Длина катетера	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм и 5.0 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64")

*** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.25x0814L	2.25 / 8 мм	ZSTC3.25x0814L	3.25 / 8 мм	ZSTC4.00x0814L	4.00 / 8 мм
ZSTC2.25x1014L	2.25 / 10 мм	ZSTC3.25x1014L	3.25 / 10 мм	ZSTC4.00x1014L	4.00 / 10 мм
ZSTC2.25x1214L	2.25 / 12 мм	ZSTC3.25x1214L	3.25 / 12 мм	ZSTC4.00x1214L	4.00 / 12 мм
ZSTC2.25x1514L	2.25 / 15 мм	ZSTC3.25x1514L	3.25 / 15 мм	ZSTC4.00x1514L	4.00 / 15 мм
ZSTC2.25x1814L	2.25 / 18 мм	ZSTC3.25x1814L	3.25 / 18 мм	ZSTC4.00x1814L	4.00 / 18 мм
ZSTC2.25x2214L	2.25 / 22 мм	ZSTC3.25x2214L	3.25 / 22 мм	ZSTC4.00x2214L	4.00 / 22 мм
ZSTC2.25x2514L	2.25 / 25 мм	ZSTC3.25x2514L	3.25 / 25 мм	ZSTC4.00x2514L	4.00 / 25 мм
ZSTC2.25x2914L	2.25 / 29 мм	ZSTC3.25x2914L	3.25 / 29 мм	ZSTC4.00x2914L	4.00 / 29 мм
		ZSTC3.25x3414L	3.25 / 34 мм	ZSTC4.00x3414L	4.00 / 34 мм
		ZSTC3.25x3614L	3.25 / 36 мм	ZSTC4.00x3614L	4.00 / 36 мм
		ZSTC3.25x4014L	3.25 / 40 мм	ZSTC4.00x4014L	4.00 / 40 мм
ZSTC2.50x0814L	2.50 / 8 мм				
ZSTC2.50x1014L	2.50 / 10 мм				
ZSTC2.50x1214L	2.50 / 12 мм				
ZSTC2.50x1514L	2.50 / 15 мм	ZSTC3.50x0814L	3.50 / 8 мм	ZSTC4.50x0814L	4.50 / 8 мм
ZSTC2.50x1814L	2.50 / 18 мм	ZSTC3.50x1014L	3.50 / 10 мм	ZSTC4.50x1014L	4.50 / 10 мм
ZSTC2.50x2214L	2.50 / 22 мм	ZSTC3.50x1214L	3.50 / 12 мм	ZSTC4.50x1214L	4.50 / 12 мм
ZSTC2.50x2514L	2.50 / 25 мм	ZSTC3.50x1514L	3.50 / 15 мм	ZSTC4.50x1514L	4.50 / 15 мм
ZSTC2.50x2914L	2.50 / 29 мм	ZSTC3.50x1814L	3.50 / 18 мм	ZSTC4.50x1814L	4.50 / 18 мм
ZSTC2.50x3414L	2.50 / 34 мм	ZSTC3.50x2214L	3.50 / 22 мм	ZSTC4.50x2214L	4.50 / 22 мм
		ZSTC3.50x2514L	3.50 / 25 мм	ZSTC4.50x2514L	4.50 / 25 мм
		ZSTC3.50x2914L	3.50 / 29 мм	ZSTC4.50x2914L	4.50 / 29 мм
		ZSTC3.50x3414L	3.50 / 34 мм	ZSTC4.50x3414L	4.50 / 34 мм
		ZSTC3.50x3614L	3.50 / 36 мм	ZSTC4.50x3614L	4.50 / 36 мм
		ZSTC3.50x4014L	3.50 / 40 мм	ZSTC4.50x4014L	4.50 / 40 мм
ZSTC2.75x0814L	2.75 / 8 мм				
ZSTC2.75x1014L	2.75 / 10 мм				
ZSTC2.75x1214L	2.75 / 12 мм				
ZSTC2.75x1514L	2.75 / 15 мм				
ZSTC2.75x1814L	2.75 / 18 мм				
ZSTC2.75x2214L	2.75 / 22 мм	ZSTC3.75x0814L	3.75 / 8 мм	ZSTC5.00x0814L	5.00 / 8 мм
ZSTC2.75x2514L	2.75 / 25 мм	ZSTC3.75x1014L	3.75 / 10 мм	ZSTC5.00x1014L	5.00 / 10 мм
ZSTC2.75x2914L	2.75 / 29 мм	ZSTC3.75x1214L	3.75 / 12 мм	ZSTC5.00x1214L	5.00 / 12 мм
ZSTC2.75x3414L	2.75 / 34 мм	ZSTC3.75x1514L	3.75 / 15 мм	ZSTC5.00x1514L	5.00 / 15 мм
ZSTC2.75x3614L	2.75 / 36 мм	ZSTC3.75x1814L	3.75 / 18 мм	ZSTC5.00x1814L	5.00 / 18 мм
		ZSTC3.75x2214L	3.75 / 22 мм	ZSTC5.00x2214L	5.00 / 22 мм
		ZSTC3.75x2514L	3.75 / 25 мм	ZSTC5.00x2514L	5.00 / 25 мм
		ZSTC3.75x2914L	3.75 / 29 мм	ZSTC5.00x2914L	5.00 / 29 мм
		ZSTC3.75x3414L	3.75 / 34 мм	ZSTC5.00x3414L	5.00 / 34 мм
		ZSTC3.75x3614L	3.75 / 36 мм	ZSTC5.00x3614L	5.00 / 36 мм
		ZSTC3.75x4014L	3.75 / 40 мм	ZSTC5.00x4014L	5.00 / 40 мм
ZSTC3.00x0814L	3.00 / 8 мм				
ZSTC3.00x1014L	3.00 / 10 мм				
ZSTC3.00x1214L	3.00 / 12 мм				
ZSTC3.00x1514L	3.00 / 15 мм				
ZSTC3.00x1814L	3.00 / 18 мм				
ZSTC3.00x2214L	3.00 / 22 мм				
ZSTC3.00x2514L	3.00 / 25 мм				
ZSTC3.00x2914L	3.00 / 29 мм				
ZSTC3.00x3414L	3.00 / 34 мм				
ZSTC3.00x3614L	3.00 / 36 мм				
ZSTC3.00x4014L	3.00 / 40 мм				

Примерный номер по каталогу: ZSTC3.00x1214L.